

close 





製品詳細

大型粉じん環境試験装置 DTS-12型

製品情報

- 大カテゴリ** 動物・環境試験装置/化学プラント装置
- 小カテゴリ** 環境試験
- 品目コード**
- 型式** DTS-12
- 製品名** 大型粉じん環境試験装置 DTS-12型
- 価格(税別)**

製品詳細

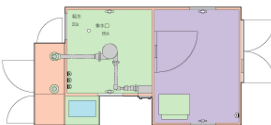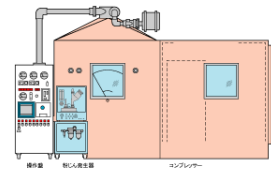

概要

本装置は、DTS-11型をスケールアップしたもので、試験体の形状が大きい場合や環境室内を温湿度設定した条件で試験する目的で設計されています。

特徴

- 試験室入口の開口部が広がっていますので、大きい試験体に適しています。
- 試験室内の状況は覗き窓から観察することができます。
- 重量物の試験体も入口のスロープを利用して容易にセッティングが可能です。
- 低濃度から高濃度まで広範囲に濃度コントロールができます。
- 空調機をオプションとして付加することができます。

仕様

試験粉体	JIS粉体
粉じん濃度	~500mg/m ³
粉じん発生器	ダストフィーダーDF-5
換気流量	~1000L/min
流量調節	周波数インバーター
濃度監視	粉じん濃度コントロールユニットMR-632
濃度コントロール	ON/OFF制御
給排気処理装置	高性能フィルター、サイクロン

電源	AC200V3相
試験室の大きさ	本室2000(W) × 2000(D) × 3000(H) mm 前室2000(W) × 2000(D) × 2300(H) mm
試験室の材質	断熱材……硬質ウレタン 内 面……ステンレス鋼 外 面……カラー鋼板

Copyright © SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY LTD. All rights reserved.