



ロータリーエバポレーター R-100 / 真空ポンプ V-100 平成ありがとうキャンペーン!

キャンペーン期間
2018年12月末まで




ビューヒのエバポレーター R-100 (標準価格 ¥320,000) が

キャンペーン価格
38% OFF

¥199,000

翌営業日
出荷可能!

※大好評につき在庫切れ
の場合は1ヶ月程度か
かる場合もあります。

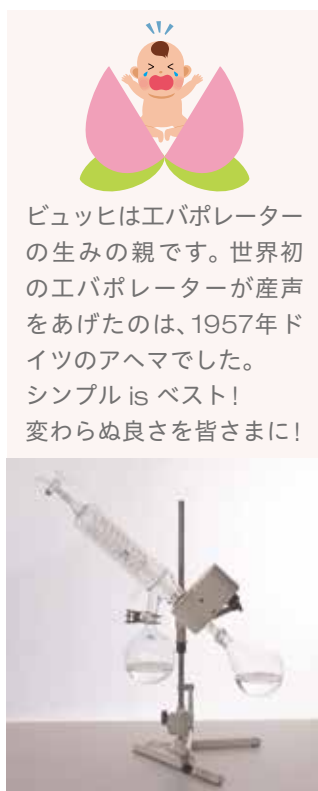

ビューヒはエバポレーターの
生みの親です。世界初
のエバポレーターが産声
をあげたのは、1957年ド
イツのアヘマでした。
シンプル is ベスト!
変わらぬ良さを皆さまに!

1957年



2018年


品名	品番	標準価格	キャンペーン価格
ロータリーエバポレーター R-100			
標準ガラス	11100V102	¥ 320,000	▶ ¥199,000
プラスチックコーティングガラス	11100V112	¥ 340,000	▶ ¥209,000

蒸留 / 濃縮時間の短縮の決め手は回転数アップ

水(100mL)を60°Cのバスで蒸留すると、回転数により蒸留時間に
以下のような差が生じます。

280rpm → 10分50秒
160rpm → 19分12秒
80rpm → 24分33秒

※当社テスト機での実測値
(設定真空度: 72hPa)

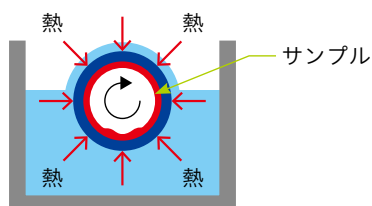

回転中の試料フラスコの断面図

裏面にはお得な
真空ポンプキャンペーン

平成ありがとう！ 洗えるポンプキャンペーン

キャンペーン期間
2018年12月末まで



簡単洗浄！ 簡単メンテナンスの洗える！ ポンプがこの価格！

超 特 価 **¥149,000~**

ラボでのさまざまな真空引き用途に



ダイヤフラム真空ポンプ V-100

品番 11V100000

標準価格 ¥200,000 ▶

キャンペーン価格 **¥149,000**

- 排気量1.5m³/h
- 到達真空度10hPa
- 低振動でとても静か
- 堅牢で壊れにくい
- 高い耐溶媒性溶媒がポンプ内部に混入しても問題なし
- 分解せずに内部洗浄可能



アスピレーターの代替に



デシケーターに



吸引濾過に

真空度を高精度に制御する用途に



インターフェースセット V-102

品番 11V100110

標準価格 ¥380,000 ▶

キャンペーン価格 **¥301,000**

内訳:
V-100本体 11V100000
インターフェース100 11I100002
ウルフびん 047170

- 電磁弁不要
- エバポレーターの真空源に最適！

真空度を高精度制御しつつ溶媒回収も行う用途に



インターフェース溶媒回収セット V-103

品番 11V100111

標準価格 ¥500,000 ▶

キャンペーン価格 **¥390,000**

内訳:
V-100本体 11V100000
インターフェース100 11I100002
ウルフびん 047170
二次コンデンサーセット 047180

- ポンプ出口に溶媒トラップコンデンサーを搭載し、逃げる溶媒を凝集させ回収
- 高精度の真空制御で安定した真空度を維持

Quality in your hands



柴田科学株式会社
本 社 〒340-0005 埼玉県草加市中根 1-1-62
東京営業所 ☎03-3822-2111 福岡営業所 ☎092-433-1207
大阪営業所 ☎06-6356-8131 仙台営業所 ☎022-207-3750
名古屋営業所 ☎052-263-9310

<http://www.sibata.co.jp/>

カスタマーサポートセンター（製品の技術的サポート専用）
☎0120-228-766 FAX: 048-933-1590

日本ビュッヒ株式会社

本 社 〒110-0008 東京都台東区池之端 2-7-17 IMON ビル 3F
TEL: 03-3821-4777 FAX: 03-3821-4555
大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 5-6-16 新大阪大日ビル 4F
TEL: 06-6195-9241 FAX: 06-6195-9251

nihon@buchi.com | www.buchi.com/jp-ja

- このカタログに記載の価格および仕様、外観は2018年9月現在のものです。
- 製品改良のため、仕様および外観が予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
- カタログの色と実際の製品の色とは、多少異なる場合があります。
- 本カタログに記載の価格には消費税は含まれておりません。
- ご使用前に、必ず取扱説明書をお読みください。
- 有機溶媒を使用される際は、適切な排気装置が付いた部屋でご使用ください。