



# ダイヤフラム真空ポンプ V-300/V-600 平成ありがとうキャンペーン!

キャンペーン期間  
2019年6月末まで



## 洗えるポンプキャンペーン!

標準価格¥370,000

**¥240,000**

キャンペーン価格

窓付き



溶媒の浸入や  
汚れを目視で  
確認できます!

V-300

品番 11V300000

排気量:1.8 m<sup>3</sup>/h  
到達真空度:**5** mbar(hPa)

標準価格¥660,000

**¥430,000**

キャンペーン価格

窓付き



溶媒の浸入や  
汚れを目視で  
確認できます!

DMF、DMSOなどの  
高沸点溶媒の蒸留に

V-600

品番 11V600000

排気量:3.1 m<sup>3</sup>/h  
到達真空度:**1.5** mbar(hPa)



### 洗えるポンプ

ポンプを使っていて「真空度が下がらなくなった」という経験はありませんか?

多くはポンプ内部の  
汚れが原因です。

- ビュッチのポンプならわずか5分の洗浄で真空度が回復します。
- 必要なものは洗浄溶媒のみ。装置を分解する必要もありません。
- ポンプ内部を確認できる窓の位置が前面に移動して見やすくなりました。

#### ポンプ洗浄方法



真空を引かなくなっ  
たら窓から内部の汚  
れを確認



洗 浄



タオルなどをポン  
プ出口に当てて汚  
れの確認



タオルに汚れが付か  
なくなったら洗浄完  
了  
真空度回復!!

### おすすめ用途

①アスピレーターの代わりに



②吸引濾過に



③デシケーターや真空  
乾燥機の真空源に



④油回転ポンプの  
代わりに




# 電磁弁を使用しない、絶妙な真空コントロール! インターフェースセット

## インターフェースによるスピードコントロールの利点


ロータリーエバポレーターや真空下での反応において、サンプルに優しい真空制御を提供します。

### 電磁バルブによる制御

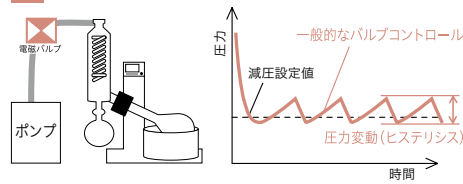

### 真空一定制御!!

### インターフェースによるスピードコントロール

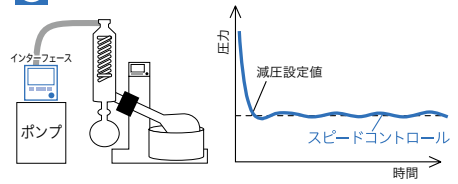

## インターフェースセット

インターフェースコントローラーを搭載し、高精度の真空制御で突沸を抑え、一定で安定した真空度を維持します。



V-302  
品番 11V300200

標準価格 ¥620,000  
**¥400,000**  
キャンペーン価格



V-602  
品番 11V600200

標準価格 ¥890,000  
**¥600,000**  
キャンペーン価格

## インターフェース溶媒回収セット

ポンプの出口に溶媒トラップコンデンサーを搭載し、逃げる溶媒を凝集させ回収します。

インターフェースコントローラーを搭載し、高精度の真空制御で突沸を抑え、一定で安定した真空度を維持します。



V-303  
品番 11V300210

標準価格 ¥740,000  
**¥480,000**  
キャンペーン価格



V-603  
品番 11V600210

標準価格 ¥1,020,000  
**¥680,000**  
キャンペーン価格

## 高性能インターフェースI-300Pro付きポンプシステムもキャンペーン中!!



V-302Pro




V-603Pro

セット名	品番	キャンペーン価格
V-302Pro	11V300300	<b>¥500,000</b>
V-303Pro	11V300310	<b>¥580,000</b>
V-602Pro	11V600300	<b>¥700,000</b>
V-603Pro	11V600310	<b>¥780,000</b>

### 圧力プログラムにより回収率改善! V-302Pro

I-300Proでは圧力プログラムの設定が可能

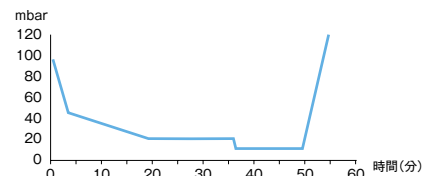

Quality in your hands



本社 〒340-0005 埼玉県草加市中根 1-1-62  
東京営業所 ☎03-3822-2111 福岡営業所 ☎092-433-1207  
大阪営業所 ☎06-6356-8131 仙台営業所 ☎022-207-3750  
名古屋営業所 ☎052-263-9310

<http://www.sibata.co.jp/>

カスタマーサポートセンター (製品の技術的サポート専用)  
☎0120-228-766 FAX: 048-933-1590

## 日本ビュッヒ株式会社

本社 〒110-0008 東京都台東区池之端 2-7-17 IMON ビル 3F  
TEL: 03-3821-4777 FAX: 03-3821-4555  
大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 5-6-16 新大阪大日ビル 4F  
TEL: 06-6195-9241 FAX: 06-6195-9251

nihon@buchi.com | [www.buchi.com/jp-ja](http://www.buchi.com/jp-ja)

- このカタログに記載の価格および仕様、外観は2018年12月現在のものです。
- 製品改良のため、仕様および外観が予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
- カatalogの色と実際の製品の色とは、多少異なる場合があります。
- 本カタログに記載の価格には消費税は含まれておりません。
- ご使用前に、必ず取扱説明書をお読みください。
- 有機溶媒を使用される際は、適切な排気装置が付いた部屋でご使用ください。

## LINE@

お得な情報・うれしい情報をお届けしています。  
ぜひ、お友だち登録をお願いします。  
登録していただいた方には、プレゼント進呈中!

