



「カウル付フィルターホルダー φ47 アスベスト用」に取り付ける場合

本製品をカウル付フィルターホルダーφ47 用アスベスト用（品目コード 080140-004）に取り付ける場合は、カウル付フィルターホルダーカウル部とパッキン大を同梱のホルダーふたとパッキンに付け替えてください。

■同梱のホルダーふたとパッキン

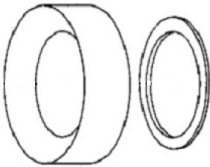

●カウル付フィルターホルダー φ47 アスベスト用（品目コード 080140-004）

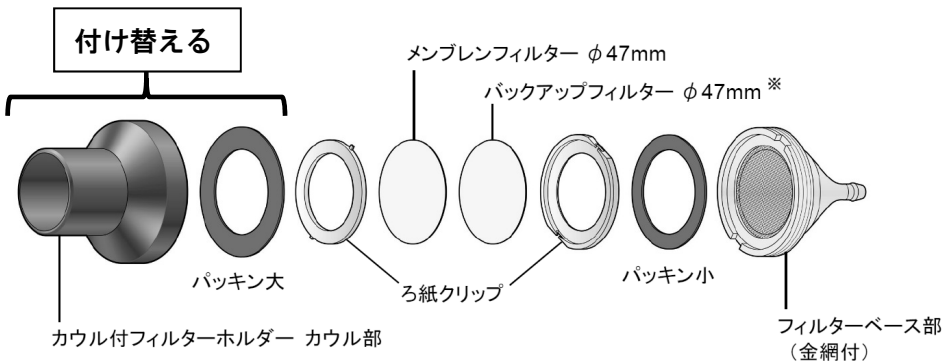

※ メンブレンフィルターの後ろ側にフィルターの破れ防止、吸引ポンプの汚染防止などのため、バックアップフィルター（PTFE バインダーフィルターまたはガラス繊維フィルター）を装着してください。

 **柴田科学株式会社**

営業所 東京・大阪・名古屋・福岡・仙台

カスタマーサポートセンター（製品の技術的サポート専用）

 0120-228-766  FAX 048-933-1590

<http://www.sibata.co.jp>