

理化学用
ガラス

ビーカー・
フラスコ

セパラブル

試験管・
沈殿管

びん

培養容器

体積計に
ついて

ピペット

メスシリンダー・
メスフラスコ

ビュレット

分注器一覧

ハンディ
ピペット

卓上型分注器

粘度計

ろ過器

メンブレン
フィルター

デシケーター

分液ポート

カラム

公定分析

冷却器

分留管

トラップ

受器

連結管

栓

加工用ガラス

実験用
補助器具



017410-

ねじ口デシケーター 中板、プラスチックキャップ付 GL-32 DURAN®

Desiccators, Scheibler, screw thread on cover with plastic screw cap

品目コード	呼称	全高 mm	中板の上高さH mm	質量kg	価格¥ SC
017410-150	150	(239)	(81)	2.5	25,000
017410-200	200	(296)	(115)	5.3	33,000
017410-250	250	(344)	(120)	6.5	46,500
017410-300	300	(420)	(150)	7.3	68,000

※全高にはキャップを含みません。
※寸法と容量は144ページをご参照ください。



017430-

ねじ口デシケーター 上口 コック付、中板、プラスチックキャップ付 GL-32 DURAN®

Desiccators, Scheibler, screw thread on cover with plastic screw cap with stopcock

品目コード	呼称	全高 mm	中板の上高さH mm	質量kg	価格¥ SC
017430-150	150	(239)	(81)	2.6	36,000
017430-200	200	(296)	(115)	5.4	45,000
017430-250	250	(344)	(120)	6.6	54,000
017430-300	300	(420)	(150)	7.3	68,800

※全高にはキャップ、コック部を含みません。
※吸引口径はφ8mmです。
※寸法と容量は144ページをご参照ください。



017440-

ねじ口デシケーター 上口 横口 コック付、中板、プラスチックキャップ付 GL-32 DURAN®

Desiccators, Scheibler, screw thread on cover and base with plastic screw cap, stopcock and socket on the cover and side

品目コード	呼称	全高 mm	中板の上高さH mm	質量kg	価格¥ SC
017440-150	150	(239)	(81)	2.6	49,800
017440-200	200	(296)	(115)	5.5	53,800
017440-250	250	(344)	(120)	6.7	59,800
017440-300	300	(420)	(150)	7.4	83,800

※全高にはキャップ、コック部を含みません。
※それぞれの吸引口径はφ8mmです。
※寸法と容量は144ページをご参照ください。



017450-

ねじ口デシケーター 横口 コック付、中板、プラスチックキャップ付 GL-32 DURAN®

Desiccators, Scheibler, screw thread on cover and base with plastic screw cap, stopcock and socket on the cover and side

品目コード	呼称	全高 mm	中板の上高さH mm	質量kg	価格¥ SC
017450-150	150	(239)	(81)	2.6	45,000
017450-200	200	(296)	(115)	5.4	49,000
017450-250	250	(344)	(120)	6.6	59,000
017450-300	300	(420)	(150)	7.3	83,000

※全高にはキャップを含みません。
※吸引口径はφ8mmです。
※寸法と容量は144ページをご参照ください。



注意事項

- ・容器内を減圧される時は、弱い力でゆっくりと減圧してください。
- ・ガラスに傷があれば破損しますので、十分確認してからご使用ください。
- ・電気炉などで熱せられたルツボなどをそのまま入れると、熱衝撃で中板が破損しますのでご注意ください。

※キャップは上口、横口の両方ともGL-32です。
※デシケーターの中板は磁製です。
※記載の寸法には±の公差があり、また()は参考寸法ですので、目安としてご利用ください。
※カタログ品名の末尾や製品に材質マークを入れております。材質マークについては38ページをご参照ください。

理化学用
ガラスビーカー・
フラスコ

セパラブル

試験管・
沈殿管

びん

培養容器

体積計に
ついて

ピペット

メスシリンダー・
メスフラスコ

ビュレット

分注器一覧

ハンディ
ピペット

卓上型分注器

粘度計

ろ過器

メンブレン
フィルター

デシケーター

分液ロート

カラム

公定分析

冷却器

分留管

トラップ

受器

連結管

栓

加工用ガラス

実験用
補助器具

017470-




017480-




017460-



017450-759

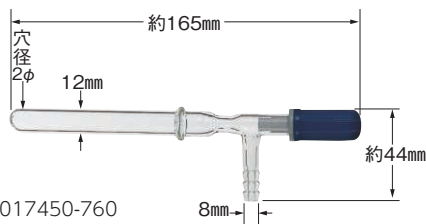

017450-760

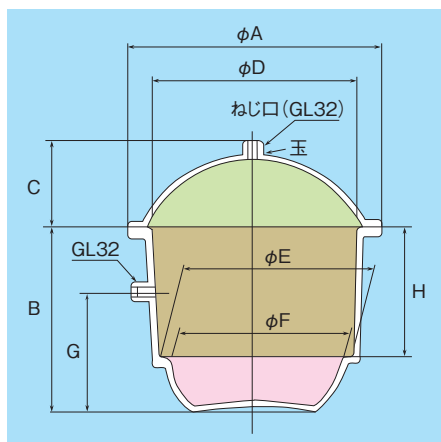

デシケーター 白 DURAN®

DURAN Desiccator with plane flange without junction with knobbed lid

特徴

- 蓋と本体ともに減圧に耐える仕様
- 磁性の中板付属
- ISO13130準拠

品目コード	呼称	全高 mm	質量 kg	価格¥ SC
017470-150	150	(252)	3	25,000
017470-200	200	(309)	5	33,000
017470-250	250	(357)	8	45,000
017470-300	300	(433)	13	63,000

※017470-250は、JIS A1460建材ボード類]および、「JIS A6922壁紙、建具用でん粉系接着剤」のホルムアルデヒド放散量試験に準拠

ふたのみ デシケーター 白 DURAN®

Desiccator Cover with knob

持ち手が玉状になったデシケーターのふたです。本体呼称に合わせてサイズをお選びください。

品目コード	適用(呼称)	直径 mm	高さ mm	価格¥ SC
017480-150	150用	215	98	13,500
017480-200	200用	270	107	15,500
017480-250	250用	320	122	19,500
017480-300	300用	380	150	37,000

中板のみ ねじロデシケーター用

Desiccator Plate, Porcelain

品目コード	適用(呼称)	直径 mm	価格¥ SH
017460-1501	150用	(142)	800
017460-2001	200用	(190)	1,700
017460-2501	250用	(240)	1,900
017460-3001	300用	(280)	3,600

※材質は磁製です。

※品目コード017410-、017430-、017440-、017450-、017470-に共通で使用できません。

コック ねじロデシケーター用 SIBATA®

Stop Cock for desiccator

品目コード	品名	価格¥	
017450-759	コック ねじロデシケーター用(キャップパッキン付)	6,800	SC
017450-760	ニードルコック(T字形) (キャップなし)	7,000	SC
017450-7601A	シリコンパッキン ニードルコック用 10入	11,000	SH

※品目コード017430-、017440-、017450-に共通で使用できます。

※カタログ品名の末尾や製品に材質マークを入れております。材質マークについては38ページをご参照ください。

ねじロデシケーターの寸法

(単位:mm)

	φA	B	C(ねじ)	C(玉)	φD	φE	φF	G	H	中板
-150	215	154	85	98	172	(145)	(115)	105	(81)	142
-200	270	202	94	107	224	(195)	(160)	135	(115)	190
-250	320	235	109	122	274	(245)	(210)	165	(120)	240
-300	380	283	137	150	332	(290)	(260)	200	(150)	280

※寸法、容量は品目コード017410-、017430-、017440-、017450-共通です。

ねじロデシケーターの容量

	中板より下	胴(中板より上~)	ふた
-150	500mL	2L	500mL
-200	1L	5	1L
-250	3	7	2
-300	4	13	4

無色透明と2種類の紫外部～可視部 (400nm,520nm) カット用プラスチック製デシケーター

- 理化学用ガラス
- ピーカー・フラスコ
- セパラル
- 試験管・沈殿管
- びん
- 培養容器
- 体積計について
- ピペット
- メスシリンダー・メスフラスコ
- ビュレット
- 分注器一覧
- ハンディピペット
- 卓上型分注器
- 粘度計
- ろ過器
- メンブレンフィルター
- デシケーター**
- 分液ロート
- カラム
- 公定分析
- 冷却器
- 分留管
- トラップ
- 受器
- 連結管
- 栓
- 加工用ガラス
- 実験用補助器具



エコノミーデシケーター

Economy Desiccators

新素材“ハーツラスFS”を採用したプラスチックデシケーターです。

- 吸湿剤の受皿付
- 無色透明タイプと紫外線400nmカット、520nmカットの3種

仕様

タイプ	縦タイプ	横タイプ
有効内寸 mm	287(W)×290(D)×487(H)	487(W)×290(D)×287(H)
棚板	アクリル製	
棚耐荷重	2kg/枚	
棚板間隔	一段目50mm、他は30mm間隔で調節可能	

エコノミーデシケーター 縦タイプ

Economy Desiccators, Vertical type

品目コード	型 式	カット波長	棚数	外寸法 (W×D×H) mm	価格¥SE
047550-11	EC-11	—	3	300×345×525	19,000
047550-12	EUV-12	400nm	3		38,000
047550-13	EUV-13	520nm	3		38,000

エコノミーデシケーター 横タイプ

Economy Desiccators, Horizontal type

品目コード	型 式	カット波長	棚数	外寸法 (W×D×H) mm	価格¥SE
047550-21	EC-21	—	2	500×345×335	23,000
047550-22	EUV-22	400nm	2		38,000
047550-23	EUV-23	520nm	2		38,000

ドライデシケーター

Automatic Dry-up Desiccators

除湿ユニットは庫内空気中の湿度を直接電気分解し、連続的に安定した除湿を行なうことができます。

特徴

- 消費電力は3Wと非常に経済的
- 除湿ユニットには駆動部がなく静音設計
- 庫内の湿気は気体として外部に放出

仕様

タイプ	縦タイプ	横タイプ
有効内寸 mm	285(W)×275(D)×485(H)	485(W)×275(D)×285(H)
棚耐荷重	2kg/枚	
棚板間隔	一段目50mm、他は30mm間隔で調節可能	
質量	6.5kg	
電源	AC80～240V 50/60Hz 平均消費電力3W	

ドライデシケーター 縦タイプ

Automatic Dry-up Desiccators, Vertical type

品目コード	型 式	カット波長	棚数	外寸法 (W×D×H) mm	価格¥SE
047560-11	DC-11	—	3	330×345×525	45,000
047560-12	DUV-12	400nm	3		65,000
047560-13	DUV-13	520nm	3		65,000

※シリカゲル皿1枚付です。

ドライデシケーター 横タイプ

Automatic Dry-up Desiccators, Horizontal type

品目コード	型 式	カット波長	棚数	外寸法 (W×D×H) mm	価格¥SE
047560-21	DC-21	—	2	530×345×335	47,000
047560-22	DUV-22	400nm	2		65,000
047560-23	DUV-23	520nm	2		65,000

※シリカゲル皿1枚付です。

■分光特性

ハーツラスFSは400nmカットタイプ、520nmカットタイプとも0.01%以下の透過率になっています。

とくに400nmカットタイプのモデルは、ほぼ透明の状態に近く、デシケーター内にある保存物をはっきり観察することが可能です。

