


ガラス容器中で試料を高速回転で粉砕、混合



B-400型

■カッター部の説明

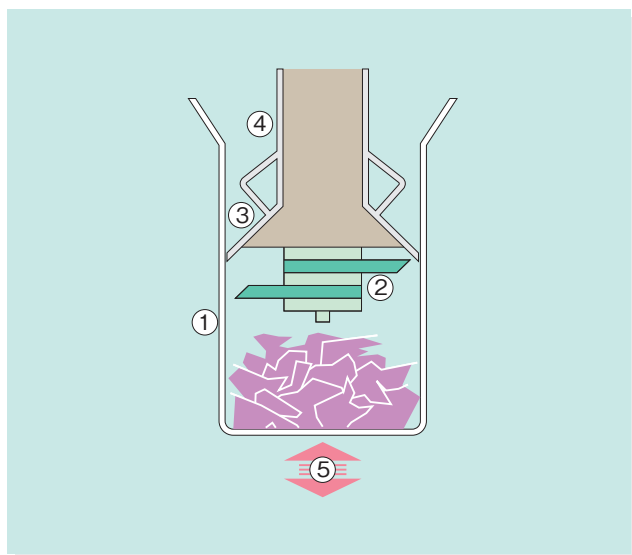

① サンプル容器

ほうけい酸ガラス製のビーカー型容器です。

② カッター (回転刃)

2枚刃とウェブで構成されたカッターで、回転速度とトルクをモニターします。

③ ダイヤフラム・シール

プラスチック (PP) 製のシールで、粉砕中のサンプル損失を防ぎます。

④ シール用弾力性ホルダー

粉砕中はサンプルの状態にあわせて、サンプル容器内の体積を可変します。

⑤ サンプル容器用リフト

サンプルによって容器の高さを自動的に昇降し、調節します。


ミキサー B-400型

Mixer, Model B-400

ミキサーB-400型は、2枚の高速回転刃により、不均一なサンプルを汚染させることなく簡単かつ迅速に粉砕し、均一に混合します。

特徴

- 操作の安全性 (安全対策) を考慮した設計で品質管理や分析のルーチンワークに必要な粉砕ができ、洗浄も容易にできます。
- サンプル容器内に弾力性のあるシーリング機構を採用。サンプルの損失を防ぎ、かつ処理時間を短縮します。
- 粉砕は数秒で処理できますので、本体からの熱の影響はほとんどありません。

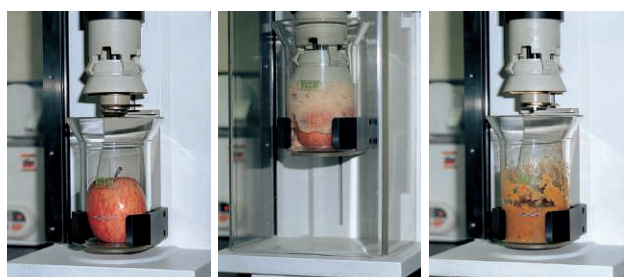

▲サンプルを入れる

▲粉砕中

▲終了

仕様



品目コード	F34503-4220 (50Hz)	F34503-4239 (50Hz)
	F34503-4325 (60Hz)	F34503-4327 (60Hz)
型式	B-400	
性能	回転数	約9000rpm
	処理量	10~100g
	使用温度範囲	5~40℃
構成	カッター	ステンレス製 セラミック製
	サンプル容器	ほうけい酸耐熱性ガラス (JR-1)
	ダイヤフラムシール	ポリプロピレン製 (PP)
	リフト (サンプル容器用)	自動昇降機能
規格	電源	AC230V 単相 50Hz AC230V 単相 60Hz
	消費電流	10A
	寸法	300 (W) × 530 (D) × 510 (H) mm
	質量	26kg
価格¥	SZ ご照会ください	

外形寸法図 ▶ 582

■スペアパーツおよびオプション



品目コード	品名	価格¥
F34502-6441	サンプルビーカー	SZ ご照会 ください SJ
F34503-4339	ステンレス回転刃	
F34503-4340	セラミック回転刃	
F34502-6900	ダイヤフラムシール (PP製)	
F34503-6912	ダイヤフラムシール (PVDF製)	
F34502-6436	ダイヤフラムシールホルダー	