



ケルダール分解器 ご愛顧感謝キャンペーン
高性能試料管で安全・安心な分解作業

2021年3月注文分まで

試料管
総数 **10,000本**
プレゼント!

分解器を
購入の方
全員に

分解器にセットできる本数と
同じ本数分の試料管をプレゼント!



IR型分解器

K-425/436/439



アルミブロック型分解器

K-446/449

ビューヒのケルダール分解器は、次の方におすすめします!

- 食品のたんぱく質分析をされる方
- 肥飼料の窒素／たんぱく質分析を実施される方
- 製薬／化学分野で窒素測定をされる方
- 初めて窒素・タンパク質分析を始められる方
- 手分析からの切り替えを検討されている方
- 会社の品質管理部門、大学／高専の農・工・薬・栄養学部の学生実験担当の方
- ケルダール分解器を10年以上ご使用中の方／更新を検討中の方
- ドラフトが酸で腐食し、更新を考えられている方

このキャンペーン期間中に
ビューヒの分解器をぜひご検討ください!!

この機会にビュッヒの試料管をぜひお試しください!

安全・安心のオリジナル設計


耐久性抜群

丈夫で買い替え頻度が
少なく経済的!

- 肉厚なガラスのため衝撃に強い
- 蒸留時のアルカリによる腐食に対しても、長期間使用が可能

硫酸が漏れない

- 試料管の口がボールジョイント形状のため、排気筒との接触部を面で捉えることで、密閉性がアップ (IR型分解器)
- バネ付きのシーリングで、試料管にしっかり密着させることで、密閉性がアップ (アルミブロック型分解器)

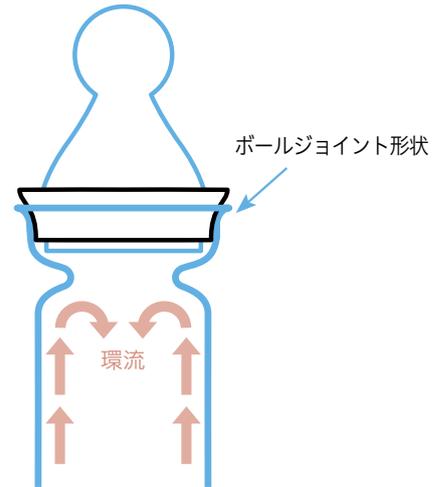

乾固しない

- くびれによって還流を促す構造のため、乾固を抑制
- 硫酸ガスが凝集し、必要以上に酸性ガスが吸引しないため乾固を抑制

ケルダール関連商品も一緒にお問い合わせください。

ケルダール蒸留機



ケルダール蒸留器 K-375
蒸留・滴定、計算までも自動で実施

スクラバー



スクラバー K-415
硫酸ガスを安全に中和
(冷却、中和、吸着の3段階構え)

Quality in your hands



本社 〒340-0005 埼玉県草加市中根 1-1-62
東京営業所 ☎03-3822-2111 福岡営業所 ☎092-433-1207
大阪営業所 ☎06-6362-7321 仙台営業所 ☎022-207-3750
名古屋営業所 ☎052-263-9310

<http://www.sibata.co.jp/>

カスタマーサポートセンター (製品の技術的サポート専用)
☎0120-228-766 FAX: 048-933-1590

- このカタログに記載の価格および仕様、外観は2020年5月現在のものです。
- 製品改良のため、仕様および外観が予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
- カタログの色と実際の製品の色とは、多少異なる場合があります。
- 本カタログに記載の価格には消費税は含まれておりません。
- 本カタログに記載以外の、運送費、設置費などについては別途お問い合わせください。
- 追加アクセサリや仕様についてご不明な点は別途お問い合わせください。
- ご使用前に、必ず取扱説明書をお読みください。
- 有機溶媒を使用される際は、適切な排気装置が付いた部屋でご使用ください。

LINE@

お得な情報・うれしい情報をお届けしています。
ぜひ、お友だち登録をお願いします。

