



# ロータリーエバポレーター R-100 大特価キャンペーン

ビューヒのエバポレーターをお求めやすい価格でご提供！

~~2016年12月末納品分まで~~

**期間延長により2017年3月末日納品分まで！**

ビューヒのエバポレーター R-100 (標準価格 ¥311,000) が

キャンペーン価格  
**36% OFF**

**¥199,000**

翌営業日  
出荷可能！

## 高い安全性

フラスコの取り外しに木槌不要で  
ガラス破損のリスクを低減




R-100ではフラスコ固定部  
品(コンビクリップ)を使っ  
て、長時間の減圧によって  
固着したフラスコも簡単に  
取り外せます。

## 蒸留時間短縮

高速回転で熱伝導効率を高めて  
蒸留スピード UP

回転数により蒸留時間に以下のような差が生じます。  
(水100mL、バス温度60°C)

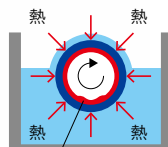

サンプル  
回転中の試料フラスコ  
の断面図

**280rpm → 10分50秒**

160rpm → 19分12秒

80rpm → 24分33秒

※当社テスト機での実測値  
(設定真空度: 72hPa (mbar))



ロータリーエバポレーター R-100

| 品名                   | 品番        | 標準価格      | キャンペーン価格          |
|----------------------|-----------|-----------|-------------------|
| ロータリーエバポレーター単体 R-100 |           |           |                   |
| 標準ガラス                | 11100V102 | ¥ 311,000 | ▶ <b>¥199,000</b> |
| プラスチックコーティングガラス      | 11100V112 | ¥ 329,000 | ▶ <b>¥209,000</b> |

エバポレーター+ポンプ+インターフェースのセットの購入でさらにお得 **詳細は裏面に！**

# エバポレーター + ポンプ + インターフェースのセット

## セットはさらにここがお得!!

- お得1** 個別に買うよりお得な値段  
個別に購入した場合 ¥500,000 ⇒ セット一括購入で ¥480,000
- お得2** 突沸リスクを低減  
真空制御して過減圧を避ける
- お得3** 回収率を改善  
真空制御して真空源への溶媒/目的物の流出を防止



ロータリーエバポレーター R-100



ダイヤモンド真空ポンプ  
インターフェースセット V-102

| 品名                      | 品番         | キャンペーン価格で<br>個別に購入した場合 | セットキャンペーン価格 |
|-------------------------|------------|------------------------|-------------|
| エバポレーター+ポンプ+インターフェースセット |            |                        |             |
| 標準ガラス                   | 11100V1002 | ¥500,000               | ▶ ¥480,000  |
| プラスチックコーティングガラス         | 11100V1102 | ¥510,000               | ▶ ¥490,000  |

Quality in your hands

SIBATA 製品のご寿命は…



SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY LTD.

**柴田科学株式会社**

本社 〒340-0005 埼玉県草加市中根 1-1-62

東京営業所 ☎03-3822-2111 福岡営業所 ☎092-433-1207

大阪営業所 ☎06-6356-8131 仙台営業所 ☎022-207-3750

名古屋営業所 ☎052-263-9310

<http://www.sibata.co.jp/>

カスタマーサポートセンター (製品の技術的サポート専用)  
☎0120-228-766 FAX: 048-933-1590

- このカタログに記載の価格および仕様、外観は2017年1月現在のものです。
- 製品改良のため、仕様および外観が予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
- カタログの色と実際の製品の色とは、多少異なる場合があります。
- 本カタログに記載の価格には消費税は含まれておりません。
- ご使用前に、必ず取扱説明書をお読みください。
- 有機溶媒を使用される際は、適切な排気装置が付いた部屋でご使用ください。