




ロータリーエバポレーター R-100 “令和初”お助けプライスカンペーン

ご好評につき、期間延長が決定!
~~2019年12月末まで~~
2020年3月末まで

R-100 (標準価格 ¥320,000) が
¥199,000
キャンペーン価格 **38% OFF**



ビュッチはエバポレーターの生みの親です。世界初のエバポレーターが産声をあげたのは、1957年ドイツのアヘマでした。シンプル is ベスト! 変わらぬ良さを皆さまに!

高い安全性
プラスチックコーティング
ガラスの使用で安全・安心

万一の破損時でもガラス欠片が飛散しません。



高い安全性
フラスコの取り外しに木槌不要でガラス破損のリスクを低減

R-100ではフラスコ固定部品(コンビクリップ)を使って、長時間の減圧によって固着したフラスコも簡単に取り外せます。




蒸留時間短縮
高速回転で熱伝導効率を高めて蒸留スピード UP

回転数により蒸留時間に以下のような差が生じます。
(水100mL、バス温度60°C)

- 280rpm** → 10分50秒
- 160rpm → 19分12秒
- 80rpm → 24分33秒

※当社テスト機での実測値
(設定真空度:72hPa(mbar))

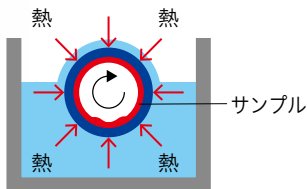

回転中の試料フラスコの断面図



ロータリーエバポレーター R-100

品名	品番	標準価格	キャンペーン価格
ロータリーエバポレーター単体 R-100			
標準ガラス	11100V102	¥320,000	▶ ¥199,000
プラスチックコーティングガラス	11100V112	¥340,000	▶ ¥209,000

裏面：ロータリーエバポレーター V-100 に最適な真空ポンプ V-100 へ

洗えるポンプ! ダイアフラム真空ポンプ V-100 “令和初” お助けプライスカンパーン

ご好評につき、期間延長が決定!
~~2019年12月~~まで
2020年3月末まで

簡単洗浄! 簡単メンテナンスの洗える! ポンプがこの価格!

キャンペーン特価 **¥149,000~**



ラボでのさまざまな真空引き用途に



ダイアフラム真空ポンプ V-100

品番: 11V100000 標準価格: ¥200,000

キャンペーン価格 **¥149,000**

- 排気量1.5m³/h ● 到達真空度10hPa
- 低振動でとても静か
- 高い耐溶媒性溶媒がポンプ内部に混入しても問題なし
- 分解せずに内部洗浄可能

《おすすめ用途》

- ① アスピレーター代わりに

- ② デシケーターや真空乾燥機の真空源に

- ③ 真空乾燥機の減圧に


真空度を微妙に制御する用途に



インターフェイスセット V-102

品番: 11V100110 標準価格: ¥380,000

キャンペーン価格 **¥301,000**

- エバポレーターの真空源に最適!
- 電磁弁が不要なのに、真空制御が可能に!

《おすすめ用途》

- ① 吸引濾過に

- ② エバポレーターの真空源に


真空度を微妙に制御しつつ溶媒回収も行う用途に




インターフェイス溶媒回収セット V-103

品番: 11V100111 標準価格: ¥500,000

キャンペーン価格 **¥390,000**

- ポンプ出口に溶媒トラップコンデンサーを搭載し、排気中の溶媒を凝集させ回収
- ポンプの内部の洗浄を受けフラスコでトラップ
- 電磁弁が不要なのに、真空制御が可能に!

《おすすめ用途》

エバポレーターの真空源に


Q. ポンプを使って「真空度が下がらなくなった」という経験はありませんか?

A. 多くはポンプ内部の汚れが原因です。

ビュッヒの洗えるポンプなら
● わずか5分の洗浄で真空度が回復します。
● 必要なものは洗浄溶媒のみ。

【ポンプ洗浄方法】



Quality in your hands

SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY LTD.
柴田科学株式会社

本社 〒340-0005 埼玉県草加市中根 1-1-62
東京営業所 ☎03-3822-2111 福岡営業所 ☎092-433-1207
大阪営業所 ☎06-6362-7321 仙台営業所 ☎022-207-3750
名古屋営業所 ☎052-263-9310

<http://www.sibata.co.jp/>

カスタマーサポートセンター (製品の技術的サポート専用)
☎0120-228-766 FAX: 048-933-1590

- このカタログに記載の価格および仕様、外観は2019年12月現在のものです。
- 製品改良のため、仕様および外観が予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
- カatalogの色と実際の製品の色とは、多少異なる場合があります。
- 本カタログに記載の価格には消費税は含まれておりません。
- ご使用前に、必ず取扱説明書をお読みください。
- 有機溶媒を使用される際は、適切な排気装置が付いた部屋でご使用ください。

LINE

お得な情報・うれしい情報をお届けしています。
ぜひ、お友だち登録をお願いします。

